

CAD/CAM冠

キャンペーン実施期間
2018年 3月22日▶4月20日

数量
限定

セラスマート
270
新価格!

ベストマッチキャンペーン 第2弾!



平素は、ジーシー製品をご愛用いただきまして誠にありがとうございます。
この度、「CAD/CAM冠 ベストマッチキャンペーン」を実施いたします。是非、この機会にジーシー製品をご用命ください。

Aadva CAD/CAM用

【健保適用】 Aadva (2年保証サポート対象商品)
CAD/CAM冠用材料(II)該当

色調: **3色**
A2LT、A3LT、A3.5LT

【包装・希望医院価格】
5個1函(各色):
・サイズ12=¥24,200
・サイズ14=¥24,200
・サイズ16=¥24,700



NEW

対象製品

セラスマート
300
大白歯用



【健保適用】 UNIVERSAL用
CAD/CAM冠用材料(II)該当

色調: **3色**
A2LT、A3LT、A3.5LT

【包装・希望医院価格】
5個1函(各色):
・サイズ12=¥24,200
・サイズ14=¥24,200
・サイズ16=¥24,700

Aadva CAD/CAM用

【健保適用】 Aadva (2年保証サポート対象商品)
CAD/CAM冠用材料(I)該当

色調: **5色**
A1LT、A2LT、A3LT
A3.5LT、A4LT

【包装・希望医院価格】
5個1函(各色):
・サイズ12 = ¥13,200
・サイズ14 = ¥13,450
・サイズ14L = ¥14,100



対象製品

セラスマート
270
小白歯用



【健保適用】 UNIVERSAL用
CAD/CAM冠用材料(I)該当

色調: **5色**
A1LT、A2LT、A3LT
A3.5LT、A4LT

【包装・希望医院価格】
5個1函(各色):
・サイズ12 = ¥13,200
・サイズ14 = ¥13,450
・サイズ14L = ¥14,100

	Aadva CAD/CAM用	UNIVERSAL用
セラスマート300/270 対応の加工機	・Aadvaハーモニー WET ・Aadva Mill LD-I ・Aadva Mill LW-I	・DWX-50 / 51D / 52DC / 4 (DGSHAPE[Roland]) ・オーシーエス-1hana (デジタルプロセス株式会社) ・トロフィーカム(株式会社ヨシダ) ・ベレッツァ4xミリングマシン / 5xミリングマシン(株式会社アイキャスト)
		・シェーラエコミル5X(ウエットミリングオプション装置) / 5Xチェンジ(ウエットミリングオプション装置) / シェーラミルwet(名南歯科貿易株式会社) ・エクスマイル EXM-5S(モディアシステムズ株式会社)

※記載の各社商標は、それぞれ各社の標準または登録商標です。

キャンペーンセット品

セラスマート300/270
いずれか 5個入1函 と 右記4点を
組み合わせさせていただきます!



ジーセム ONE
ユニバーサル(A2)
3.6mL特別仕様 1函
【期間限定販売品】
希望医院価格 ¥4,800

CAD/CAM冠の
接着に最適な
セメント



ジーセム ONE
接着強化プライマー
1mL特別仕様 1本
【期間限定販売品】
希望医院価格 ¥1,700

支台歯接着面に
塗布する
プライマー



G-マルチプライマー
1mL特別仕様 1本
【期間限定販売品】
希望医院価格 ¥2,800

CAD/CAM冠
内面に塗布する
プライマー

使用ステップを
分かりやすく
まとめました!



ジーセム ONE
ステップチャート
1部

※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。予めご了承ください。希望医院価格は税抜価格です。

ご注文書

キャンペーン実施期間 2018年 3月22日▶4月20日

貴医院名

ご住所 〒

TEL ()

お取引販売店

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受注発注業務に活用させていただきます。

株式会社 ジーシー

支店 ●東京(03)3813-5751
●大阪(06)4790-7333
●北海道(011)729-2130
●東北(022)207-3370
●名古屋(052)757-5722
●九州(092)441-1286

ご用命は

	対象製品	サイズ	色調*/ご注文数	キャンペーン セット品
セラスマート 300	Aadva CAD/CAM用 5個1函	12		●ジーセム ONE ユニバーサル(A2) 3.6mL特別仕様 1函 ●ジーセム ONE 接着強化プライマー 1mL特別仕様 1本 ●G-マルチプライマー 1mL特別仕様 1本 ●ジーセム ONE ステップチャート 1部
		14		
		16		
	UNIVERSAL用 5個1函	12		
		14		
		16		
セラスマート 270	Aadva CAD/CAM用 5個1函	12		
		14		
		14L		
	UNIVERSAL用 5個1函	12		
		14		
		14L		

※色調: セラスマート300は「A2LT、A3LT、A3.5LT」から
セラスマート270は「A1LT、A2LT、A3LT、A3.5LT、A4LT」からお選び下さい。

CAD/CAM冠 支台歯形成のポイント

■ 小白歯

■ 大白歯






セラスマート クリアランスゲージ

先端径
φ2.0mm

先端径φ1.5mm


●咬合面の厚みを簡単に確認できます。
希望医院価格 ¥4,800

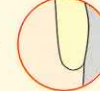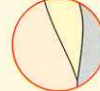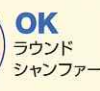

※アンダーカットがないためらかな形成

《支台歯形成でなぜ鋭利な切端がNGなのか?》

●CAD/CAM用ミリングバーの直径が細いものでも1mm程度あるため、隅角部の形状は、鋭利にならないように角を丸めて1mm以上の厚みが必要です。

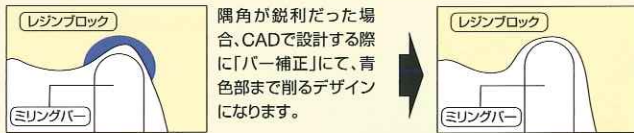


結果として 咬合面の厚みが確保できなくなったり、内面の適合が悪くなる可能性があります。

《保持力について》

●適正な形成

※軸面テーパは6~10°

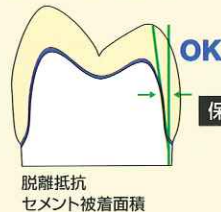


●軸面テーパが強い

●軸面の高さが低い

●展開角のない咬合面部

※脱離しやすい

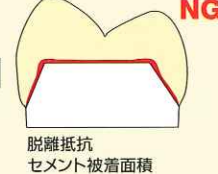

支台歯形成にオススメのバーセット

■ セラスマート プレパレーションバーセット



1箱セット
希望医院価格 ¥5,950

	隣接面 カット	ガイドグループ作製 軸面形成/マージン形成	咬合面 形成	仕上げ
レギュラータイプ	A18	BR2	BR5	PR17
超微粒子タイプ				BO1ff
最大径(mm)	1.6	1.6	1.9	2.3

■ スムースカットBR6

別売のスムーズカット
BR6があると
大白歯の形成に便利

1本
希望医院価格 ¥1,190

	軸面形成/ マージン形成
レギュラータイプ	BR6
超微粒子タイプ	
最大径(mm)	2.2

装着のポイント(ジーセム ONE)



G-マルチプライマー(修復物側)

- 塗布後、十分に乾燥
- すべての修復物に対応
- 2種類の接着性モノマー(リン酸エステル系モノマー、チオリン酸エステル系モノマー)とシランカップリング剤を配合

※歯質に対する接着性も向上させることを目的に内面処理を行った場合は、CAD/CAM冠内面処理加算として装着料に45点を加算します。

ジーセム ONE

- CAD/CAM冠の装着には、2種類のプライマーと併用
- ※メタル修復物に使用する場合は、「ジーセム ONE」のみで使用できます。

歯科用合着・接着材料I 17点

プライマー処理について

修復物側	支台歯側		
CAD/CAM冠	天然歯	メタルコア	レジンコア
■G-マルチプライマーを塗布	■接着強化プライマーを塗布		

接着強化プライマー(支台歯側)

- 塗布後、10秒間放置し、十分に乾燥
- 「G-プレミオバンド」で実績のある接着性モノマー配合(4-MET、リン酸エステル系モノマー、チオリン酸エステル系モノマー)＋タッチキュア効果(重合促進効果)

タッチキュア効果(重合促進効果)

G-マルチプライマー タッチキュア効果

●支台歯(高洞)に塗布された接着強化プライマーとセメントが接触することにより、プライマー中に含まれる化学重合開始剤がセメントの硬化を促進し、支台歯(高洞)側から重合反応が始まり、装着後、接触面から安定した接着性を発現します。