

SALE

2018年10月22日~12月27日



マグネット式超音波スケーラー

Cavitron® Winter Campaign 2018

2018年10月22日から12月27日まで



Cavitron Touch®



Cavitron®
Select™ SPS™



Cavitron® Plus
MP Tap-On™



Cavitron®
JET Plus Tap-On™

キャビトン タッチ

使いやすさを追求したタッチパネル採用超音波スケーラー



1 キャビトンタッチ
特別価格

2 キャビトンタッチ導入パック
特別価格

キャビトン セレクト SPS

電源ひとつでどこでもスケーリングが可能なコンパクトタイプ



3 キャビトンセレクト SPS
特別パッケージ

キャビトン プラス MP タップオン

足元を気にせずスケーリングに集中できる超音波スケーラー



4 キャビトンプラス MP タップオン
特別パッケージ

キャビトン JET プラス タップオン

一台でスケーリングとエアージェットが行える超音波スケーラー



5 キャビトンJET プラス タップオン
特別パッケージ

超音波スケーラーの発振方式には マグネット式とピエゾ式の2種類が存在します

〈マグネット式〉
チップ先端の振動



チップ先端から4mmの範囲、
すべての面が使用できます



チップ先端から4mmにおいて
振動が発生
広範囲の除去が期待できる



チップのすべての面で
スケーリングがおこなえる
1本のチップで様々な部位に対応できる

〈ピエゾ式〉
チップ先端の振動





チップ先端のアクティブエリアは歯石やバイオフィルムを除去するエリアです。使い続けることによりチップが摩耗すると、効率の低下に繋がります。

摩耗したチップはスケーリング中に過度なダメージを歯牙に与える可能性もあり、術者および患者の不快感に繋がります。



2mm摩耗したチップを使用してスケーリングを行うと…

30% INCREASE

スケーリング時間

+

40% MORE

歯牙へのダメージ

術者によるスケーリングで治療時間と歯牙へのダメージともに増加するリスクがある
(デンツプライシロナ社調べ)



インサート摩耗チェックガイド

お持ちのインサートを、下記の適切な規格の図に合わせてください。チップが青もしくは赤ラインまで消耗していれば買替えをお勧めします。

【最適】

チップが青いラインを超える




【買替検討】

チップが青いラインまで効率が25%減少してます



【買替時期】

チップが赤いラインまで効率が50%減少してます

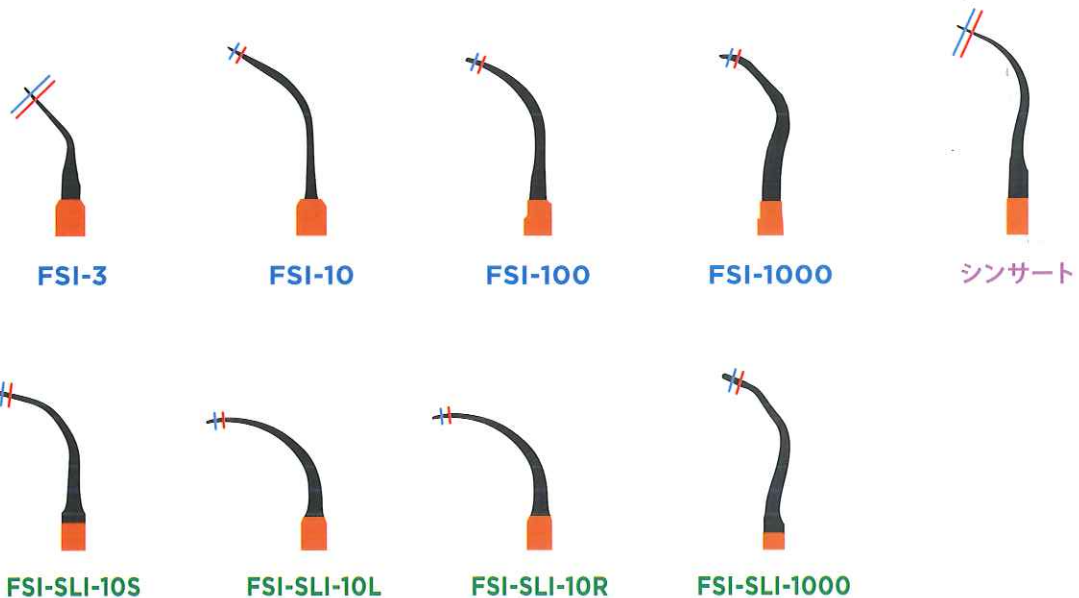

Cavitron®

特別価格対象品

No.	製品番号	製品名	メーカー小売希望価格	インサートチップ内容	ご注文数
1	8250004	キャビトロン タッチ	363,000円	-	セット
2	8250004J	キャビトロン タッチ導入パック	384,510円	FSI-1000 / FSI-SLI-1000	セット

特別価格対象パッケージ

No.	製品番号	製品名	メーカー小売希望価格	インサートチップ内容	ご注文数
3	81309SE	キャビトロン セレクト SPS	160,000円	FSI-1000 / FSI-SLI-10S / シンサート	セット
4	8184004JPC	キャビトロン プラス MP タップオン	309,910円	FSI-3 / FSI-1000 / シンサート FSI-SLI-1000 / FSI-SLI-10L / FSI-SLI-10R	セット
5	8187504SE	キャビトロン JET プラス タップオン	487,490円	FSI-1000 / JETインサート / シンサート	セット

Cavitron® Inserts

特別価格対象品

No.	製品番号	製品名	メーカー小売希望価格	用途	ご注文数
6	80797	FSI-3	8,630円	多量の歯石や着色除去に用いる先端がラウンド型のチップ	本
7	80294	FSI-10	8,630円	中程度から多量の縁上歯石除去用で除去効率に長けたチップ	本
8	80798	FSI-100	8,630円	中程度から多量の縁上歯石除去用で除去効率に長けたチップ	本
9	80799	FSI-1000	8,630円	中程度から多量の縁上歯石除去用で除去効率に長けたチップ	本
10	80395	FSI-SLI-10S	9,200円	縁上用よりも30%スリム化にすることで縁下のプラーク除去に長けたチップ	本
11	80396	FSI-SLI-10L	9,200円	根面の湾曲部への適合のため開発されたチップ	本
12	80397	FSI-SLI-10R	9,200円	根面の湾曲部への適合のため開発されたチップ	本
13	81570	FSI-SLI-1000	12,880円	チップの形状を台形にすることでスリムラインの中で最も除去効率に長けたチップ	本
14	81551	シンサート	12,880円	スリムラインよりも47%スリムになり、叢生部や深いポケットへのアプローチが容易	本
15	90411	インプラント用インサート	13,800円	チップ先端にディスパーザブルプラスチックを装着することで対象物のキズを防ぎます。	本

■薬事情報

販売名:キャビトロン タッチ
販売名:キャビトロン セレクト(SPS)
販売名:キャビトロン プラス MP タップオン
販売名:キャビトロン ジェット プラス タップオン

一般的名称:歯科用多目的超音波治療器 医療機器認証番号:230AIBZX00002000 クラス:クラスII(管理・特管)
一般的名称:超音波歯周周用スクレーパー 医療機器認証番号:21200BZY00442000 クラス:クラスII(管理・特管)
一般的名称:歯科用多目的超音波治療器 医療機器認証番号:224AABZX00162000 クラス:クラスII(管理・特管)
一般的名称:歯科用多目的超音波治療器 医療機器認証番号:224AABZX00163000 クラス:クラスII(管理・特管)

■キャンペーン注意事項

① キャンペーン商品の返品および交換は一切いたしかねます。② 他の特別価格商品と併用してご利用いただくことはできません。③ 本キャンペーンをご注文いただく際には本チラシの注文欄をご利用いただくか、注文用紙にキャンペーンである旨を必ずご記入下さい。④ 数量限定につき、期間中でも品切れの場合は終了とさせていただきます。

ご施設名

〒 - ※郵便番号は必ず記入してください。

ご住所

TEL:

FAX:

お取り扱い商店