

数量限定

# バルクベースキャンペーン

期間：2019年5月21日～6月20日

裏層 充填

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。

このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、「バルク裏層! バルク充填! バルクベースキャンペーン」を企画いたしました。

期間中、「バルクベース® ハード 単品・セット」、「バルクベース® 単品・セット」、「バルクベースライナー® 単品」を特別価格にてご提供いたします。

ぜひ、この機会をご利用ください。

咬合面  
まで  
一括充填

## BULK BASE HARD

歯科裏層用高分子系材料  
バルクベース® ハード

重合収縮率  
2%  
以下

強度  
耐摩耗性  
アップ

光照射  
10秒  
※LED照射時

成形しやすい  
ローフロー  
タイプ

凹凸のある  
複雑な  
窩洞には

## BULK BASE

歯科裏層用高分子系材料  
バルクベース®

重合収縮率  
2%  
以下

光照射  
20秒  
※LED照射時

充填しやすい  
ハイ&ミディアム  
フロータイプ

**単品** ユニバーサル 2.5mL (4.8g)  
標準価格 4,200円 204610537

**単品** デンチン 2.5mL (4.8g)  
標準価格 4,200円 204610538

**単品** ハイフロー 2.5mL (4.8g)  
標準価格 4,200円 204610527

**単品** ミディアムフロー 2.5mL (4.8g)  
標準価格 4,200円 204610526

**セット** バルクベース ハード セット  
標準価格 13,800円 204610536

バルクベース ハードユニバーサル 1本(2.5mL/4.8g)  
バルクベース ハードデンチン 1本(2.5mL/4.8g)  
バルクベースライナー リキッド 1本(3mL)  
バルクベースライナー ライナー スポンジ 1箱(100粒)  
180コートル 10本(100個)キャップ(ブルー)2個付  
プラスチックザシヤン 5粒

**セット** バルクベース セット  
標準価格 13,800円 204610525

バルクベース ハイフロー 1本(2.5mL/4.8g)  
バルクベース ミディアムフロー 1本(2.5mL/4.8g)  
バルクベースライナー リキッド 1本(3mL)  
バルクベースライナー ライナー スポンジ 1箱(100粒)  
180コートル 10本(100個)キャップ(ブルー)2個付  
プラスチックザシヤン 5粒

**BULK BASE Liner**  
歯科用象牙質接着材  
バルクベースライナー®

リキッド® 3mL  
標準価格 6,800円 204610531

ライナー スポンジ 100粒  
標準価格 1,700円 204610532

それぞれ  
**特別価格**にてご提供!

※価格のお問い合わせは、お出入りのディーラーまでお願いいたします。


●販売名 バルクベース ●一般的名称 歯科裏層用高分子系材料 ●医療機器認証番号 225AFBZX00081000 ●医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)  
●販売名 バルクベース ハード ●一般的名称 歯科裏層用高分子系材料 ●医療機器認証番号 228AFBZX00106000 ●医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)  
●販売名 バルクベースライナー ●一般的名称 歯科用象牙質接着材 ●医療機器認証番号 225AFBZX00082000 ●医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)  
●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。 ●掲載商品の標準価格は2019年5月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。  
●ご使用に際しては、必ず製品添付の「添付文書」をお読みの上、正しくお使いください。 ●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

# 低重合収縮レジンだから1回の充填でしっかり厚みが確保できる 「バルクベース® ハード」&「バルクベース®」


## 光硬化深度4mm

深い窩洞に対しても、4mmまで一括充填できる高い硬化性により「バルク裏層」が可能になります。

さらに、「バルクベース ハード」は硬化性能が向上し、照射時間が**10秒**に短縮されました。

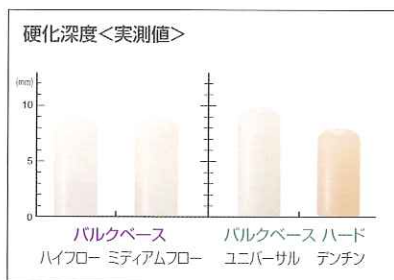

※JIS規格により硬化深度は実測値の1/2となる

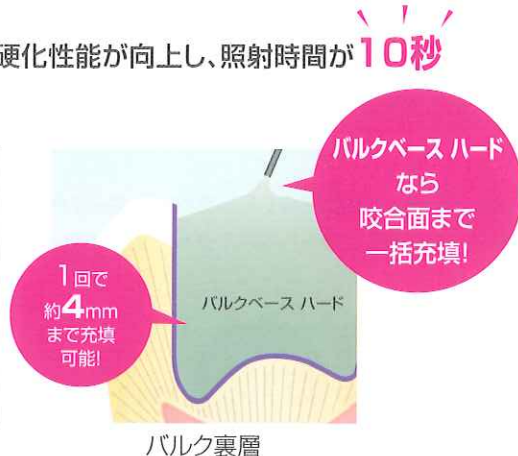

たっぷり使える!

## コストを低減

「バルク裏層」にふさわしくコストパフォーマンスに優れた大容量シリンジを採用しました。



1mL あたり 1,680円

## 低重合収縮

バルクベースシリーズは重合収縮率**2%以下**を実現しています。


	バルクベース		バルクベース ハード		当社フロアブルコンポジットレジン	試験方法
	ハイフロー	ミディアムフロー	ユニバーサル	デンチン		
重合収縮率 (%)	2.3	2.1	2.0	2.0	3.4	ISO 17304 準拠
曲げ強さ (MPa)	80	85	145	145	115	JIS T 6514:2013 基準
硬化深度 (mm)	4.5 <sup>※1</sup>	4.5 <sup>※1</sup>	4.9 <sup>※2</sup>	4.0 <sup>※2</sup>	2.0 <sup>※1</sup>	
X線造影性 <sup>※3</sup> (%)	240	240	200	200	200	アラバマ式 摩耗試験
耐摩耗性 (mm <sup>3</sup> )	4.5	4.6	1.1	1.1	0.8	

※1: LED照射器20秒照射 ※2: LED照射器10秒照射  
※3: 対アルミニウム

咬合面まで使える  
強度と耐摩耗性

(サンメディカル社試験による)

## 選べる流動性

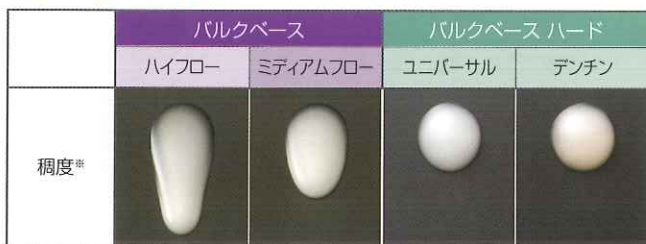

※ペースト抽出後、垂直にたて60秒後に撮影

## Question & Answer

Q1:

バルクベース ハード、バルクベースには接着性がありますか?

A:

接着性はありません。必ず、バルクベースライナーをご使用ください。

Q2:

バルクベース ハードの研磨はどのようにしたらよいでしょうか?

A:

通法に従ってコンポジットレジンと同様の形態修正と研磨を行ってください。さらに滑沢な研磨面を得たい場合は、市販のダイヤモンド粒子配合のシリコンポイントなどをご使用ください。

製造販売 サンメディカル株式会社  
滋賀県守山市古高町 571-2 〒524-0044

発売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525  
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161

お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020(フリーコール)  
www.dental-plaza.com