

KURARAY NORITAKE DENTAL CAMPAIGN NEWS

6月号
技工編

クラレ ノリタケ デンタル キャンペーンニュース

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。
 このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、
 『クラレノリタケデンタル キャンペーンニュース6月号技工編』と
 いたしまして、キャンペーンを企画いたしました。
 ぜひ、この機会をご利用ください。

この資料は、歯科医師・歯科技工士様への案内です

CRISTOBALITE



ノリタケ クリスタバライト ご愛顧感謝キャンペーン

期間中、ノリタケ クリスタバライト を **特別価格** にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

**30分
タイプ**
中硬硬化30分の
急速固着が可能。

タイトな適合性を追求した急速加熱**低膨張タイプ**埋没材

クリスタバライト ベストフィッター®

1箱を **3kg**

■標準価格 3kg(1.5kg×2袋) 4,000円 202050795



該当規格 JIS-T6601:2013

混水量(mL) <粉100gに対して>	硬化時間(分)	線硬化膨張(%) <90分後>	線熱膨張(%)	※ 総膨張率(%)	圧縮強さ (2時間後)Mpa
35	11	0.55	1.05	1.60	7.5

特別価格にてご提供!

●販 売 名 クリスタバライト ベストフィッター ●医療機器届出番号 15B1X10001302107
●一般的名称 歯科鑄造用石こう系埋没材 ●医療機器の分類 一部医療機器(クラスI)

CRISTOBALITE **BESTFITTER** 適合性を追及した「クリスタバライトベストフィッター®」をぜひ一度お試しください。


適合精度について

ベストフィッターは精度を追求した埋没材。
単冠でも大きいケースでも混水比を調節しながら使用できる。
ベストフィッターの最大の特長は「適合精度の高さ」です。総膨張率*1.60%で再現性の高さが自慢です。




再現性が良いのでこのように複雑な修復物でも適合性を追求できます。

ブリッジのような大きいケースでもワックスパターン通りの適合が得られます。

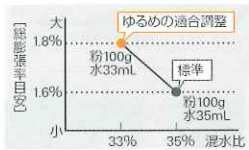

操作性について

支台歯が細い症例でも気泡が入りにくく、良好な流動性で水とのなじみがよく、
鑄造リングへの流し込みが簡単です。

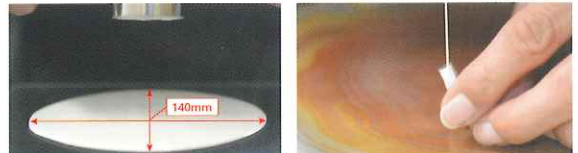

(JIS-T6601:2013に準じる試験方法)
撚和したベストフィッターを専用リングに流し込み、2分後リングを持ち上げ埋没材が広がった範囲を測定します。


流動性実験データ 23±2℃(2分後)	
クリスタバライト フォルテEx	クリスタバライト ベストフィッター
φ 140(mm)	φ 140(mm)

φ6のストローへベストフィッターを流し込み
擬似埋没をした状態です。

鑄造面について

滑沢な鑄造面。後工程の研磨時間が節約できる。
鑄造面が美しく、適度な圧縮強さを維持することで細部再現性を持っております。

■アズキャストの状態でもなめらかな鑄造面が得られます

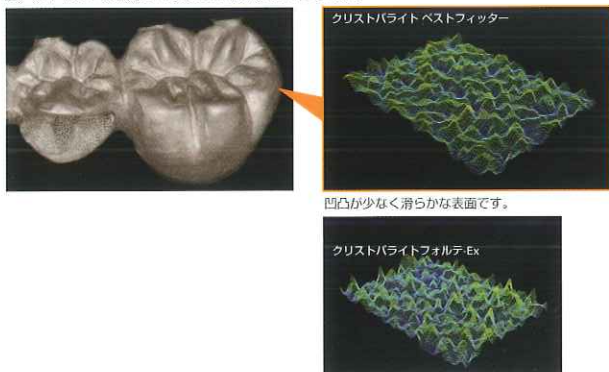


凹凸が少なく滑らかな表面です。

良好な耐クラック性について

適度な圧縮強さを維持することで、優れた細部再現性を保持。また、鑄型へのクラックを抑制し、
鑄造体へのバリが発生も最小限に抑えます。

■支台歯が細い症例にも対応可能な強度

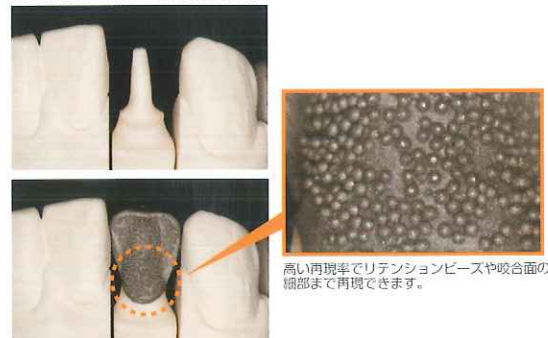

高い再現率でリテンションピースや咬合面の細部まで再現できます。

[実施期間] 2019.5.21>>>6.20

歯科鑄造用石こう系埋没材

クリストバライト フォルテ-EX 3kg

■標準価格 3kg(1.5kg×2袋) 4,000円 202050790

●医療機器届出番号 15B1X10001302106 ●医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)

耐クラック性、鑄造面の滑沢性をさらに向上。線硬化膨張(0.90%)と線熱膨張(0.90%)の絶妙なバランスと安定性により、メタルコアから、ロングスパンブリッジまでバリのない、シャープなマージンの鑄造体を得ることができます。



30分
タイプ

※埋没後30分の急速加熱が可能。

特別価格にてご提供!

歯科鑄造用石こう系埋没材

クリストバライト FF-EX 3kg

■標準価格 3kg(1.5kg×2袋) 4,000円 202050770

●医療機器届出番号 15B1X10001302104 ●医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)

1991年の発売以来、技工鑄造作業にご愛顧いただき、高い精度、より安定性の高い品質、掘り出しやすさといったFFの特長を継承、さらに表面性状の滑沢性を向上させることに成功したFF-EX。ツヤのある鑄造体を得ることができ、後工程としての研磨に時間をかける必要もなく、作業空間の快適化につながります。



30分
タイプ

※埋没後30分の急速加熱が可能。

特別価格にてご提供!

歯科鑄造用石こう系埋没材

クリストバライト FF20-EX 3kg

■標準価格 3kg(1.5kg×2袋) 4,000円 202050780

●医療機器届出番号 15B1X10001302105 ●医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)

納期に追われる技工士の方々からの要望に応え、技工作業の時間短縮を目指し開発をしました。適度な流動性を兼ね備え、鑄造リングへ流し込みやすく、気泡の混入を抑えることができます。また、焼き圧縮強さを向上させることで(0.90MPa)、「バリ」崩れの発生を抑制、良好な鑄造体の製作が可能です。



20分
タイプ

※埋没後20分の急速加熱が可能。

特別価格にてご提供!

ノリタケ クリストバライトシリーズ

総膨張率の比較表
(水/粉の比率 標準35%)



※総膨張率の数値はすべて新規格(JIS-T6601:2013)での数値です。

歯科技工士向け研修会のご案内

セラビアンZRを用いた初めての ジルコニアオールセラミッククラウンの製作（基礎編）

東京 6/16(日) (加藤 尚則 先生) 大阪 6/22(土) (南澤 英樹 先生) 福岡 10/26(土) (崎田 竜仁 先生)



加藤 尚則 先生
株式会社カスプデンタルサプライ/
カナレテクニカルセンター
ポーセレンチームリーダー



南澤 英樹 先生
株式会社Dental Lab
SCALA(スカアラ)



崎田 竜仁 先生
株式会社鹿児島島ミリングセンター

本コースは、近年急速に需要が高まっているジルコニアフレームを使用したオールセラミッククラウンを製作するための初心者対象に基礎的なノウハウを取得する実技講習会です。「セラビアンZR」と「カタナジルコニアフレーム」を用いて製作手順と色調再現方法などについて、実習を通じて学んでいただけます。

■ 定員 10名 ※定員になり次第締め切ります。

■ 参加費

友の会 本人	20,000円(税別)
友の会 スタッフ(院長が一般会員)	23,000円(税別)
未入会	33,000円(税別)

カタナ®ジルコニアを用いた フルジルコニアステイニングテクニック

東京 9/1(日)



富田 佳照 先生
株式会社フィール
デンタルラボラトリー
代表

近年、フルジルコニアクラウンが広まる中、様々な症例に対応するためにジルコニアステインテクニックの重要性が増しております。本セミナーでは『カタナジルコニアSTML』を使用し、フルジルコニアクラウンに使えるステインテクニックとライトレイヤリングテクニックを実習を通して体得していただけます。また、臨床における材料選択や接着に関する情報についてもお伝えいたします。

■ 定員 10名 ※定員になり次第締め切ります。

■ 参加費

友の会 本人	36,000円(税別)
友の会 スタッフ(院長が一般会員)	39,000円(税別)
未入会	49,000円(税別)

セラビアンZRを用いた ジルコニアレストレーション実習セミナー ～基礎・応用・トラブル回避のテクニック～

福岡 7/27(土) 大阪 2020.2/1(土)



山田 和伸 先生
株式会社カスプデンタルサプライ/
カナレテクニカルセンター

ジルコニアという優れた材質を最大限有効に利用した審美修復術式が徐々に確立してきた。ただし長期的安定を実現するためには、実際に操作する歯科技工士にかかわる部分が依然大きいことは否めない。本セミナーでは、日ごろ実践している私なりの審美修復物の製作方法や、考えられる臨床上のトラブルを事前に把握した、より安全・確実なセラミックスの使用方法をテーマとし、実習をしたいと思う。

■ 定員 10名 ※定員になり次第締め切ります。

■ 参加費

友の会 本人	30,000円(税別)
友の会 スタッフ(院長が一般会員)	33,000円(税別)
未入会	43,000円(税別)

*年度途中で消費税率の改定があった場合、セミナー費は開催日時点での消費税額となります。予めご了承ください。

●クラレノリタケデンタル製品の商標、ロゴマークはクラレノリタケデンタル株式会社もしくはその親会社である株式会社クラレに帰属します。●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2019年5月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。●価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社
新潟県胎内市倉敷町 2-28 〒959-2653

販 売 株式会社 **モリタ**

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター <歯科医療従事者様専用> T 0800.222 8020(フリーコール)
www.dental-plaza.com