

i-TFCルミナスシリーズ

最初の

期間限定 数量限定

2019年(令和元年)
5月21日~6月20日

令和キャンペーン

i-TFC
LUMINOUS

便利な
「収納ケース」付き

期間限定
ファイバーポストと
レジンの
組み合わせセット



はじめてだから
まずは「間接法」でお試し!

少量お試しセット

保険適用

支台築造用ファイバーポスト・コア

i-TFCルミナス セレクトセット

期間中、1.2mmφの「光ファイバーポスト」5本と
光重合タイプフロアブルレジン「LCフロー」を
「収納ケース」に入れ、限定発売価格にてご提供します。

セット構成

i-TFCルミナスファイバー 光ファイバーポスト(1.2mmφ×18mm).....5本
i-TFCルミナスコア LCフロー.....1本(2.5mL)
19Gニードルロング.....5本(ニードルキャップ(グレー)1個付き)
収納ケース.....1ケース

単品で購入した場合
合計¥9,150を
限定発売価格

セットで

¥8,000にてご提供!

i-TFC
LUMINOUS

ファイバーポスト・
レジン・ボンドが入った
オールインワンセットも
お得です!



オールインワンセット

保険適用

支台築造用ファイバーポスト・コア

**i-TFCルミナス
ファイバーコア&ボンド セット**

セット構成

i-TFCルミナスファイバー 光ファイバーポスト(1.0mmφ×18mm).....5本
i-TFCルミナスファイバー 光ファイバーポスト(1.2mmφ×18mm).....5本
i-TFCルミナスファイバー 光ファイバーポスト(1.4mmφ×18mm).....5本
i-TFCルミナスコア LCフロー.....1本(2.5mL)
19Gニードルロング.....5本(ニードルキャップ(グレー)1個付き)
i-TFCルミナスボンド ボンド.....1本(1mL)
i-TFCルミナスボンド キャップラシ.....1ケース(30本)
プラスチックダブペン.....5枚
収納ケース.....1ケース

標準価格
¥19,000のところ

特別価格にてご提供!

レジン支台築造の違い

ファイバーポストの場合※



- ・歯根破折のリスクが低減できる
- ・メタルフリーなので金属アレルギーでも使える
- ・金属色が透けないのでCAD/CAM冠や硬質レジンジャケット冠の審美性を損なわない

既製金属ポストの場合



- ・築造体の強度が高い
- ・歯根破折のリスクが高い

メタルフリーが実現できるファイバーポストを是非お試しください!

※全ての症例に対応できるものではありません。

光にこだわるファイバーポスト・コアシステム i-TFCルミナスシリーズ

シラン処理は不要!

保険適用

光透過性の高いファイバーポスト

i-TFCルミナスファイバー 1本あたり ¥790

光ファイバーポスト
各10本入り ¥7,900

- 1.0mmφ×18mm
- 1.2mmφ×18mm
- 1.4mmφ×18mm
- 1.6mmφ×18mm



光透過性の高い光ファイバー

ポストの中心に光ファイバーが入っており深い根管の奥まで光を通すことができます。そのため根管深部のレジンまでしっかりと重合できます。



編み込まれたグラスファイバー

ファイバーポスト表面のグラスファイバーは編み込み構造になっているため、その凹凸部分にレジンが入り込み高い機械的嵌合力を発揮します。



保険適用

操作性の良い光重合レジン
i-TFCルミナスコア

LCフロー 2.5mL
¥4,300



コストパフォーマンスに優れた大容量シリンジ

無駄が少ない

オートミックスタイプのシリンジに比べて押し出し感が軽く、ストレスなく操作できます。また、ニードルチップ内のレジン残量が少ないため無駄がほとんどありません。



保険適用


根管象牙質に適したボンディング材
i-TFCルミナスボンド

次亜塩素酸の影響を受けない!

- ボンド 1本 (3mL)
- キャタブラシ 1ケース (100本)
- プラスチックダブペン 5枚
- セット ¥9,700

根管象牙質にしっかり浸透

キャタブラシに含まれる親水性重合開始剤の効果により、完全乾燥が難しい根管象牙質において高い重合性能を発揮します。また、次亜塩素酸ナトリウムの影響を受けないため安定した接着強さが得られます。

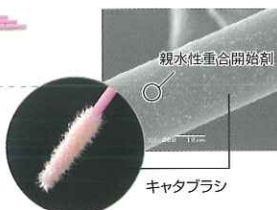

歯科専用ポスト成形品 i-TFCルミナスファイバー (管理医療機器) 医療機器認証番号 229AKBZX00057000 歯科用支台成形材料 i-TFCルミナスコア (管理医療機器) 医療機器認証番号 229AFBZX00066000 歯科用象牙質接着材 i-TFCルミナスボンド (管理医療機器) 医療機器認証番号 229AFBZX00078000

製造販売

サンメディカル株式会社

本社 / 〒524-0044 滋賀県守山市古高町 571-2 ☎ 077(582)9980

フリーダイヤル 0120-418-303 (FAX共通) 電話受付時間 月～金 (祝日を除く) 午前9:00～午後5:30

ホームページ <http://www.sunmedical.co.jp>

販売店名