

Dreve

Thermoforming Technique

最大6気圧で簡単に真空加圧形成が可能で、加熱時間と冷却時間はデジタル表示です。
さらに、0.1mmから5mmまでの厚さの各種シート材を真空加圧形成をすることが可能です。
作業中の事故防止のため、ピストンは安全ロックがあり、また、ヒーター温度が上がり過ぎるとスイッチが切れる安全設計です。



ドウルフォマットスキャン

シート材のパッケージのバーコードをスキャンングして、加熱時間と加圧時間の設定が可能
ポリマリゼーションテーブル(簡易加圧重合釜)を使用して、デンチャーのリペアーが可能

カラー：レッド・シルバー ● ●
サイズ：D290×W290×H460mm

医院価格 **¥550,000**



ドウルフォスマート

カラー：レッド・シルバー ● ●
サイズ：D290×W290×H415mm

医院価格 **¥350,000**

ドウルフォソフトカラーミックス



衝撃吸収性に優れ、吸水性の少ない全25色のソフト材です。ラミネートスポーツマウスガードで使用します。

材質：EVA 厚さ：3.0mm

コンビプラスト



透明のソフト材とハード材の2層構造です。レジン材との接着が可能で、0.07mmの絶縁フィルムが付いており、分離材は不要です。

材質：PETG/PET
厚さ：2.0mm/3.0mm/4.0mm



ファンキーツール

形成した後の余ったシート材を再利用して、オリジナルカラーの3mmのシート材が製作可能です。オリジナルカラーのシート材で、オンリーワンのマウスガードを製作してください。

対応機種：ドウルフォマットスキャン/ドウルフォスマート

バイオロン



透明な切断抵抗力のあるオクルーザルスプリント材です。優れた生体親和性があり、レジン材との接着が可能です。

材質：PET
厚さ：0.5mm/0.75mm/1.0mm/1.5mm/
2.0mm/3.0mm

製造販売元



グローバルな視点で歯科を考える

リンカイ株式会社

www.rinkai-tokyo.co.jp

リンカイ

検索

お問い合わせ、資料請求は ミンナヨイハ

0120-307418

〒160-0012 東京都新宿区南元町19番地 信濃町外苑ビル3階 TEL: 03-3359-4321 FAX: 03-3353-8403

Dreve シート材一覧

硬質材 軟質材

商品名	用途	特長	カラー	厚さ	枚数	加熱時間	レジン接着	
バイオロン	スプリント ステント	透明な切断抵抗のあるオクルーザルスプリント材です。 優れた生体親和性があり、レジンとの接着が可能です。 また、軟質材との接着も可能です。	クリアー	0.5mm	25枚	1:00	可	
				0.75mm	20枚	1:05		
				1.0mm	25枚	1:10		
				1.5mm	30枚	1:20		
				2.0mm	20枚	1:45		
ドゥルフォソフト	マウスガード ポジションナー	弾性に優れた透明のEVA材です。 生体親和性が非常に高く、ラミネートマウスガードには 不可欠なシート材です。	クリアー	1.0mm	20枚	0:45	不可	
				1.5mm	20枚	1:00		
				2.0mm	15枚	1:05		
				3.0mm	10枚	1:50		
ドゥルフォソフト カラー	マウスガード ポジションナー	衝撃吸収性に優れたEVA材です。 生体親和性が非常に高く、ラミネートマウスガードには 不可欠なシート材です。 *ネオン色(蛍光色)は、他の色より透明度があります。	蛍光赤、蛍光緑、蛍光黄、青、黄、 黒、白、ピンク、赤、ターコイズ、金、 銀、紺、緑、パープル、ライトブルー、 ボルドー、オレンジ	3.0mm	各10枚	1:35~1:50	不可	
ドゥルフォソフト ピカラー	マウスガード ポジションナー	厚さ3.0mmのEVAシート材です。 ※120mmのみ	黄黒黄、白青白、赤青赤	3.0mm	各3枚		不可	
ドゥルフォソフト トリカラー	マウスガード ポジションナー	厚さ3.0mmのEVAシート材です。 ※120mmのみ	黒赤黄、青白赤、赤緑青	3.0mm	各3枚		不可	
ドゥルフォソフトプロ	ポジションナー リテーナー スプリント	衝撃吸収性に優れた3.0mmのショア硬度95の 硬質マウスガードです。	クリアー	3.0mm	10枚	2:15	不可	
バイオブリーチ	ブリーチング	薬剤のトレー材として使用可能な薄くて強度の高い透明な シート材です。型崩れしないハードタイプと、しっかりと薬剤を 歯牙につけられるソフトタイプがあります。	クリアー	ハード	0.5mm	25枚	1:00	可
				ソフト	1.0mm	20枚	1:05	不可
ドゥルフォレンH	マトリクス コーピング	ハードタイプのコーピング材です。 簡易リテーナーやブリッジ用として使用できます。	白	0.6mm	40枚	1:20	不可	
				0.8mm	40枚	1:40		
ドゥルフォレンW	マトリクス コーピング	コーピング専用のソフトシート材です。 焼成時に焼成残留物を残しません。	白	0.45mm	40枚	1:10	不可	
				0.65mm	40枚	1:15		
				0.8mm	40枚	1:25		
			青	1.0mm	30枚	1:40		
				0.65mm	40枚	1:15		
				0.8mm	40枚	1:25		
コンビプラスト	スプリント	透明の軟質材と硬質材の2層構造のスプリント材です。	クリアー	2.0mm	10枚	1:45	可	
				3.0mm	10枚	2:15		
				4.0mm	10枚	2:45		
ドゥルフォプラスト	ベースプレート 個人トレー ステント	ピンクはベースプレート用、個人トレー用です。 クリアーはベースプレート、ステントなど、用途に応じて使い 分けができます。	ピンク クリアー	2.0mm	15枚	1:35	不可	
				3.0mm	30枚	1:55		
				3.0mm	10枚	1:55		
コーピングUZF	コーピング	コーピング製作時のスペースを確保するために使用する スペーサーシート材です。ドゥルフォレンH・ドゥルフォレンWと 接着せずに形成できるフィルム材です。	赤	0.1mm	100枚		不可	

ドゥルフォソフト カラー



ドゥルフォソフト



クリアー

ドゥルフォソフト ピカラー



黄黒黄

白青白

赤青赤

ドゥルフォソフト トリカラー




黒赤黄

青白赤

赤緑青

ドゥルフォソフト カラーミックス

ドゥルフォソフトカラー・クリアー・ピカラー・
トリカラーの全25色が各1枚ずつ入った
お得なセットです。

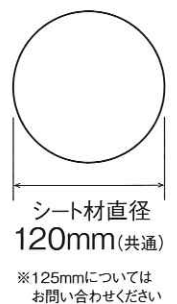

※実際の色は印刷とは多少異なる場合があります。
2015/11

■お問合せ・資料請求は技術営業部まで

0120-307-418

【受付時間】 9:00~18:00 (土・日祭日を除く)

〒160-0012 東京都新宿区南元町19番地 信濃町外苑ビル 3階

【FAX】 03-3353-8403

いろいろあります! 豊富な商品ラインナップ
<http://www.rinkai-tokyo.co.jp/>

リンカイ株式会社 リンカイ 検索

お届け歯科商店