

特別価格  
ブルーフェーズ  
キャンペーン

2023/11/1 (水) ~  
12/25 (月)迄

## ブルーフェーズ PowerCure

高出力 **3,000mW/cm<sup>2</sup>** LED照射器  
光量測定器、未重合アシスト機能 (ポリビジョン) 搭載



ブルーフェーズ  
PowerCure  
詳細はこちらから

ハイエンドモデル

### ブルーフェーズ PowerCure プレミアムキット

667092BU 1セット

一セット内容

ハンドピース、バッテリー、ライトプロープ 10>9mm、  
アンチグレアコーン×3、アンチグレアシールド×1、チャージングベース、  
ハンドピーストレイ、電源コード、ACアダプタ

標準価格

~~¥235,000~~

¥258,500 (税込)

## ブルーフェーズ N G4

スタンダード **2,000mW/cm<sup>2</sup>**  
LED照射器



ブルーフェーズ  
N G4  
詳細はこちらから

スタンダードモデル

### ブルーフェーズ N G4 プレミアムキット

744011BU 1セット

一セット内容

ハンドピース、バッテリー、ブルーフェーズG4ライトプロープ 10mm、アンチグレアコーン×3、  
アンチグレアシールド×1、チャージングベース、ハンドピーストレイ、電源コード

標準価格

~~¥138,000~~

¥151,800 (税込)

製造販売元

Ivoclar Vivadent 株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-24

TEL:03-6801-1301 FAX:03-5844-3657

[ivoclar.com](http://ivoclar.com)


	光量 2000mW/cm <sup>2</sup> 台	光量 3000mW/cm <sup>2</sup> 台
	ブルーフェーズ N G4	ブルーフェーズ PowerCure
Ivoclar Vivadent ブルーフェーズ 比較表		
標準価格	138,000 円	235,000 円
照射モード	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TURBO : 2,100 m W/cm<sup>2</sup></li> <li>• HIGH パワー : 1,200 m W/cm<sup>2</sup></li> <li>• プレキュア : 950 mW/cm<sup>2</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3s キュア : 3,050 m W/cm<sup>2</sup></li> <li>• TURBO : 2,100 m W/cm<sup>2</sup></li> <li>• HIGH パワー : 1,200 m W/cm<sup>2</sup></li> <li>• プレキュア : 950 mW/cm<sup>2</sup></li> </ul>
ライトプローブ (標準)	[691265] G4 / N G4 共通 10mm	[667092BU] PowerCure 専用 10 > 9 mm
波長域	385 ~ 515nm	
ポリビジョン機能*	—	○
光量測定器	別売り ([667124] ブルーフェーズ メーターII)	チャージングベースに付属
保証期間	3 年保証 (バッテリー 1 年)	
その他の特長	—	バッテリーの残量が完全に空になった場合、 電源に直接つないで使用可能
	別売りのピンポイントライトプローブが使用可能 [691264] G4 / N G4/ PowerCure 共通 6 > 2 mm	

\* 照射中、照射位置がずれると使用者に音と振動で知らせ、未重合リスクを軽減。歯面を認識し作動するため歯面以外の照射を防止し安全面も考慮。


## ビームプロファイル

信頼性のある重合において、光量と波長域に加えて、放出される光の分布も重要です。重合する材料の表面全体に均等な光が分布していないと、完全な重合を得られない場合があります。光が均等に分布されるよう優れた光学設計が施されています。

均等な光の分布 (ブルーフェーズ)

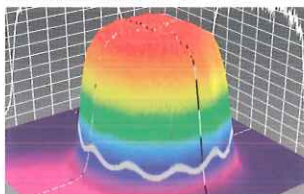

不均等な光の分布例

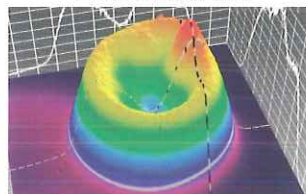


Source: B.Senn, Test Report, Ivoclar Vivadent AG, 2019

## ポリウェーブ テクノロジー

Ivoclarが開発したポリウェーブLEDにより、ハロゲンのような385~515nmの広いスペクトルを持っています。どのような光重合開始材 (ルシリンTPO・カンファーキノン) にも反応し、重合できます。



広い波長域の  
効果ビデオ

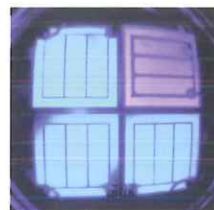

一般的名称: 歯科重合用光照射器 / 販売名: ブルーフェーズ N G4 / 届出番号: 13B1X10049IVBNG4 / 一般医療機器 / 特定保守管理医療機器  
一般的名称: 歯科重合用光照射器 / 販売名: ブルーフェーズ PowerCure / 届出番号: 13B1X10049IVE025 / 一般医療機器 / 特定保守管理医療機器



株式会社モモセ歯科商会

本社・大阪営業所: 〒543-8691 大阪市天王寺区南河堀町6-35  
TEL:06-6773-3333(代)  
東京営業所 : 〒110-0016 東京都台東区台東2-24-2  
TEL:03-3835-2653(代)  
九州営業所 : 〒812-0893 福岡市博多区那珂6-24-21  
TEL:092-575-6060(代)  
URL:<http://www.momose-dm.co.jp/>