

# DB カリエスハンター

デンタルバンク カリエスハンター

## 地域限定 新規採用キャンペーン

2023年11月21日～12月20日

クリニック・ご家庭で手軽に  
虫歯や、みがき残しを発見できます。  
衛生士への必需品

虫歯発見

プラーク発見

本体1年保証

DB カリエスハンター

¥40,000 (税別)

- ハンドピース (本体)
- ライトガイドロッド 90°
- ライトガイドロッド 120°
- バッテリー
- 充電器 (USB ケーブル付)
- AC アダプター
- 防護メガネ
- 取扱説明書
- 保証書・保証規定




緑：健全歯



赤：う蝕部位



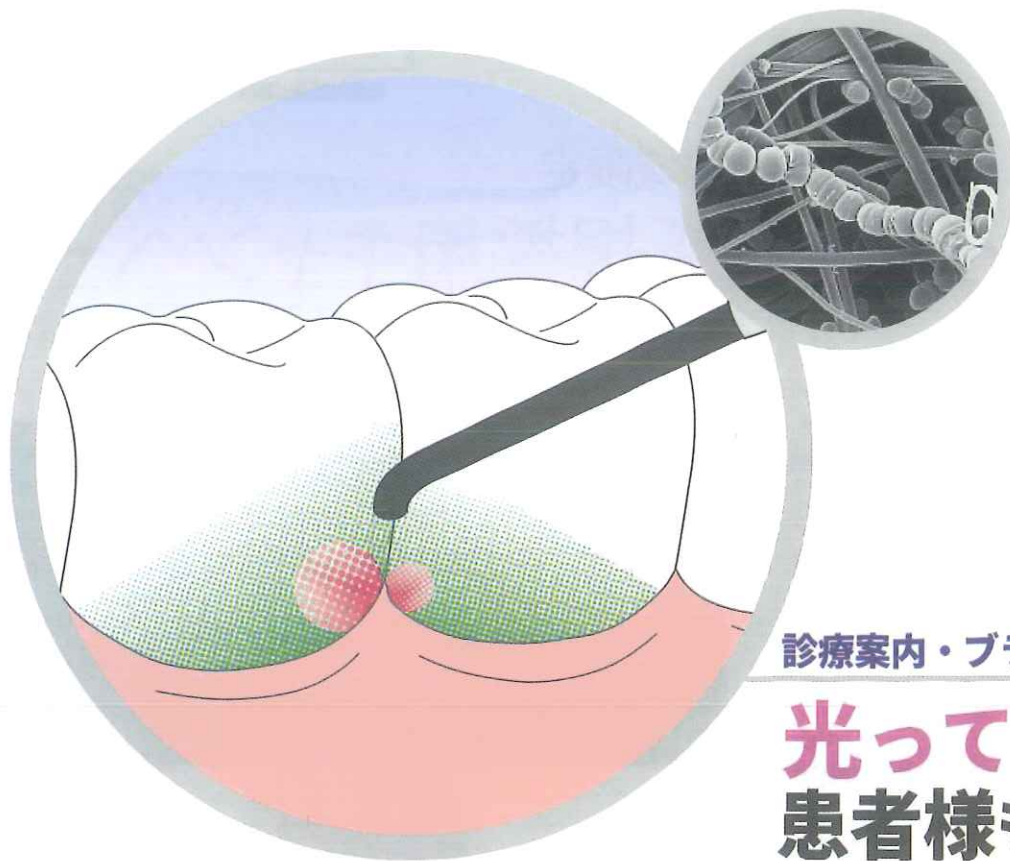

診療案内・ブラッシング指導に新提案

## 光って見えるから 患者様も安心・納得

説明しづらい虫歯や磨き残しを赤く光ってお知らせするからスムーズなご案内が可能になります。そのため面倒な歯垢染色剤や、う蝕検知液のかわりに手軽にお使いいただけます。患者様への案内や治療の確認にマルチに活躍する1台です。

### 面倒な準備なしで細菌を可視化

本機より発せられる約400nmの波長の光により健全な歯質は緑色に、う蝕部位や歯石・歯垢といった細菌が密になっている部位は赤色に光ります。



**期間中、専用スリーブ 500 枚と組み合わせ価格にてご提供！！**



### 製品概要

機械器具 02 医療用照明器 一般医療機器 汎用歯科用照明器 (12351000)  
届出番号: 40B1X10014000008

寸法	長さ: 182 mm (ライトガイドロッド装着時) 幅: 15.0 mm (最大径)
質量	84.7 g (ライトガイドロッドおよびバッテリーを含む)
作動電圧	DC 3.7 V
光源	LED (class 1 LED 製品)
波長域	約 400 nm
バッテリー	リチウムイオン電池
充電時間	約 1.5 時間 (フル充電時)
電源	AC 100~240 V (50/60 Hz)
同梱書類	日本語取扱説明書 クイックスタートガイド



株式会社日本歯科商社 ジーシーグループ

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

製造販売元

**DentalBank®**

株式会社 DentalBank 第一種医療機器製造販売業 福岡県大野城市御笠川 2-8-9  
TEL: 092-513-3280 FAX: 092-513-3281 www.dentalbank.info

2020年11月